


この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。

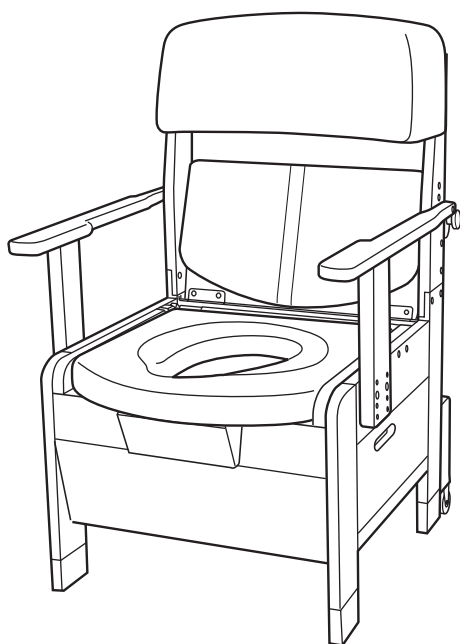

### 目次

各部の名称と製品仕様	1 P
ご使用前の注意	2 P
ご使用上の注意	2 ～ 3 P
組み立て方	3 ～ 7 P
こんな調節ができます	8 P
こんな使い方ができます	9 P
ご使用方法	10 P
お手入れ方法	10 P
修理サービスについて	10 P

福祉用具総合メーカー

 **株式会社 幸和製作所**

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時（土・日・祝日を除く）




**0120-508-058**

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.kowa-ws.co.jp>

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 各部の名称と製品仕様

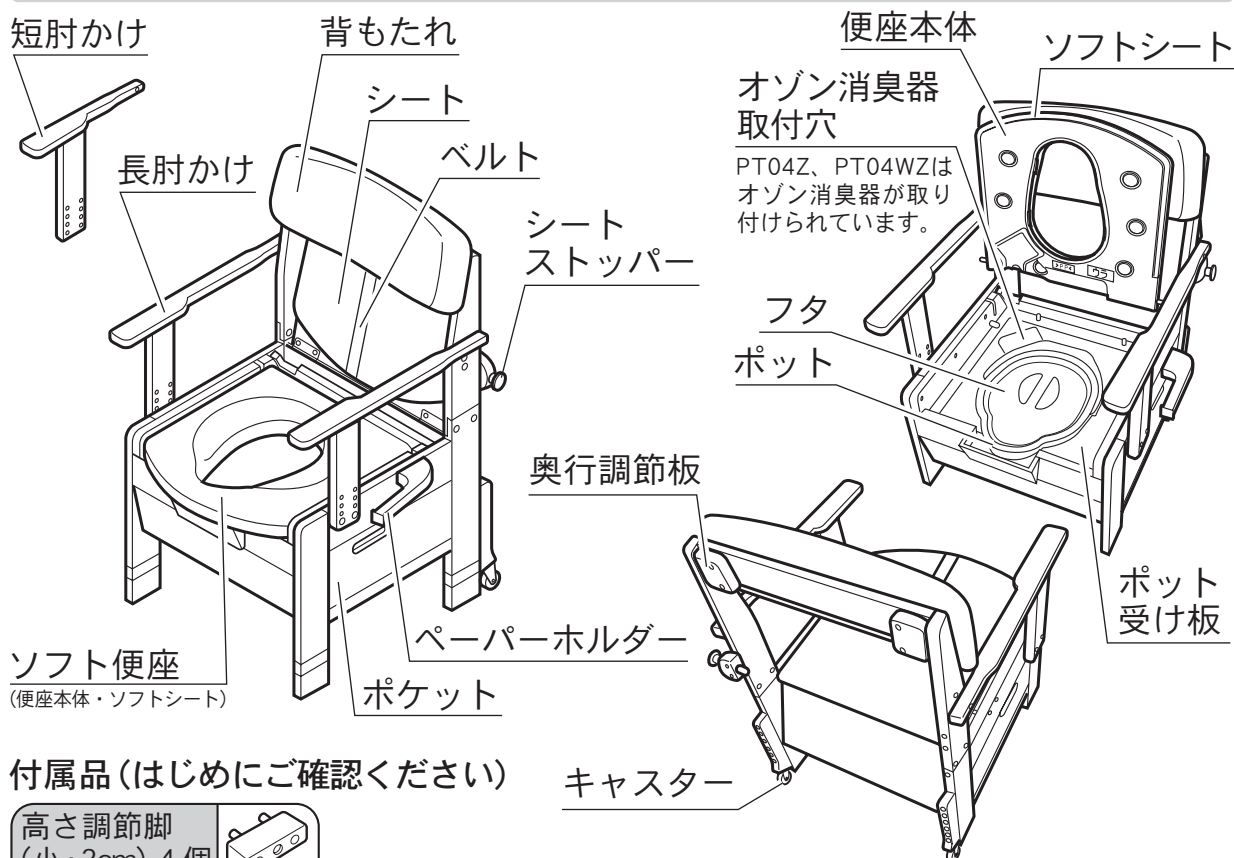

付属品(はじめにご確認ください)

高さ調節脚  
(小・3cm) 4 個



高さ調節脚  
(大・6cm) 4 個



短ネジ  
(40mm) 14本



長ネジ  
(80mm) 4本



ボルトナットセット  
4セット



六角レンチ  
2本



ペーパーホルダー  
1本



ポータブルトイレ用消臭錠 試供品

オゾン消臭器(PT04Z、PT04WZのみ)

テイコブ家具調ポータブル  
トイレ用便座カバー

1 枚

暖房シート (PT04W、PT04WZのみ)

ACアダプター (PT04Z、PT04WZのみ)

臭いが気になる方は、別売にて下記製品がございます。

- ポータブルトイレ用消臭錠 (30錠入り)
- ポータブルトイレ用消臭スプレー (300ml入り)
- ポータブルトイレ用消臭液 Mサイズ (400ml入り)
- ポータブルトイレ用消臭液 Lサイズ (1000ml入り)

組み立て寸法	幅600×奥行600×高さ830～920 mm	座 幅	420 mm
肘かけ高さ	180・200・220・240 mm	重 量	約 18 kg
肘かけ内幅	460・495 mm	最大使用者体重	100 kg
便 座 高 さ	340・370・400・430 mm	ポットの容量	9リットル
材 質	本体：天然木（ラバーウッド） 背もたれ・シート：塩化ビニル樹脂（表）、ウレタンフォーム（内部） ソフト便座：ポリエチレン（便座本体）、ウレタンフォーム（ソフトシート） ポット・ポットフタ：ポリプロピレン（耐熱温度120℃）	ポケットの最大使用重量	1 kg

## ご使用前の注意

**転倒や事故防止のため、下記の事項を必ず守ってください。**



### 警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 安定の悪い場所に設置しないでください。転倒するおそれがあります。
- 各部を点検し、キズや変形、亀裂や破損などの異常がないこと、確実に設置できていること、ぐらつきがないことを確認してください。



### 注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 組み立てるときは周囲に人がいないことを確認してください。
- 組み立て、および調節は確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 各部のネジが確実に締められていること、また破損や脱落がないことを確認してください。
- 火気の近くに設置しないでください。変形や故障の原因になります。
- 屋外では使用しないでください。本体やシートなどが劣化したり、変色したりすることがあります。
- 各部の調節は確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 本体を移動する場合はキャスターを使い、引きずらないようにご注意ください。畳や床などを傷つけることがあります。
- キャスターを使って本体を移動させるときは、両側の肘かけを持ち上げて移動させてください。肘かけ以外の部分を持つと、急に本体が落下してケガをするおそれがあります。

## ご使用上の注意



### 警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 使用者の身体状況の変化によっては、ご購入販売店やケアマネージャーなどの専門家に相談したり、介助者が付き添ってください。
- 座る際や、使用後立ち上がるときに、使用者自身が身体の安全性を十分に確保できない場合は、ポータブルトイレを固定するなど（例：ベッドにひもで固定するなど）して使用するか、介助者が付き添ってください。
- 背もたれにつかまって立ち座りをしないでください。転倒するおそれがあります。
- ペーパーホルダーやシートストッパー、折りたたんだ状態のシートに手をついたり、体重をかけないようにしてください。転倒するおそれがあります。
- 人が座ったままキャスターで移動しないでください。転倒や故障の原因となります。
- 改造したり、踏み台にするなどポータブルトイレ以外の用途に使用しないでください。破損や故障の原因になります。
- 最大使用者体重を必ず守ってください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外行わないでください。



### 注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 高さ調節など各部の調節についてはご購入販売店かケアマネージャーなどの専門家に相談されることをおすすめします。

## ⚠ 注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。


- シートを開閉するときはベルトや前端を、ソフト便座を開閉するときは前端を持ってください。側面を持つと肘かけや本体に指をはさんでケガをするおそれがあります。
- シートを背もたれの後方まで回転させてお使いになるときは、手で持ってゆっくりと回転させてください。途中で手をはなすと、シートと本体に指をはさんでケガをするおそれがあります。
- ソフト便座を取り付けるとき、また開閉するときにソフト便座の軸をさわらないでください。指をはさんでケガをするおそれがあります。
- 汚物処理などでポットを取り出すときは、ソフト便座が倒れてこないことを確認してから取り出してください。ソフト便座が倒れてくると指をはさんでケガをするおそれがあります。
- 本体を移動する場合はポット内は必ずカラであることを確認してください。中身がこぼれ、畳や床などを汚すことがあります。
- ポットの中にタバコの火を落とさないでください。
- 直接水をかけて洗わないでください。水がかかると故障や事故の原因になります。
- 便座をご使用になる場合は便座カバーをご使用ください。衣服などがこすれた際、色移りするおそれがあります。

## 組み立て方

あらかじめ、箱から背もたれ、本体、付属品を取り出してください。また本体に取り付けられているソフト便座、ポットを取りはずしてください。最後にポット受け板を手前に引きながら取り出し、以下の手順に従って組み立ててください。


### 1 本体を取り出す

図のような状態にしてください。

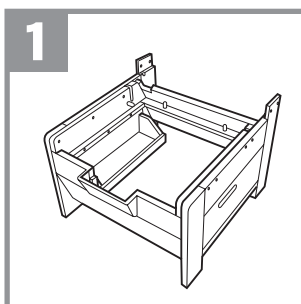


### 2 シートを取り付ける

図のようにシートの軸を本体後部の溝に入れます。

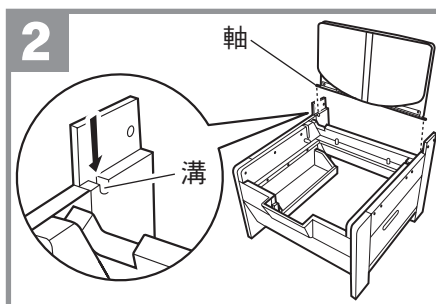


### 3 背もたれを取り付ける

背もたれを図のように取り付けます。

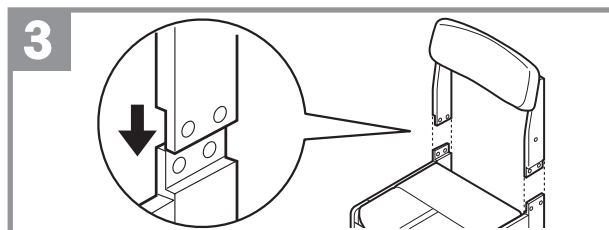

### 4 ネジで固定する

左右の背もたれの柱を、図のように4ヶ所をボルトナットセットではさみこんでしっかりと固定します。

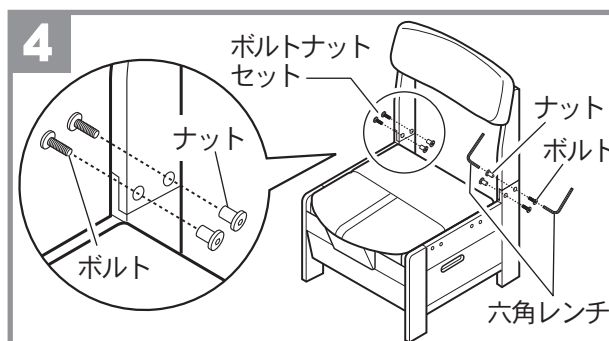

## ⚠ 注意

- 内側はナット、外側はボルトになるように配置してください。




ボルト ナット

## 5 便座の高さを調節する

便座の高さは使用される方に合わせて、4段階に変えられます。便座の高さを調節する場合は本体を横に倒し、脚の先に付属の高さ調節脚を長ネジ(80mm)でしっかり取り付けます。(高さ調節脚は組み合わせによって3cm分、6cm分、9cm分高くすることができます。)

高さ調節脚	便座高
なし	34cm
3cm (小)	37cm
6cm (大)	40cm
9cm (小+大)	43cm

### 5 (例) 9cm 分高くする場合

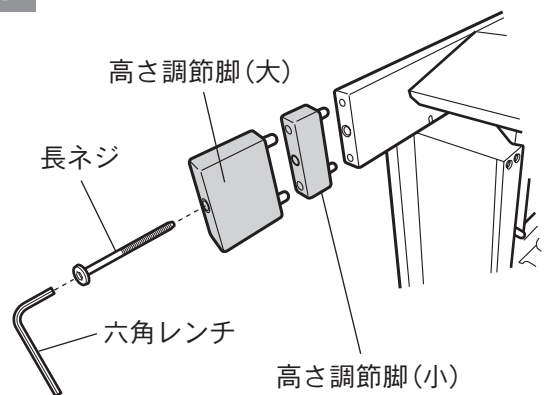


## 6 シートストッパーを取り付ける

※シートストッパーは必ず取り付けてください。

図のように背もたれの柱の裏側にシートストッパーを取り付けます。シートストッパーはノブが外側になるように、左右の柱のいずれか邪魔にならない方に取り付けてください。

### 6

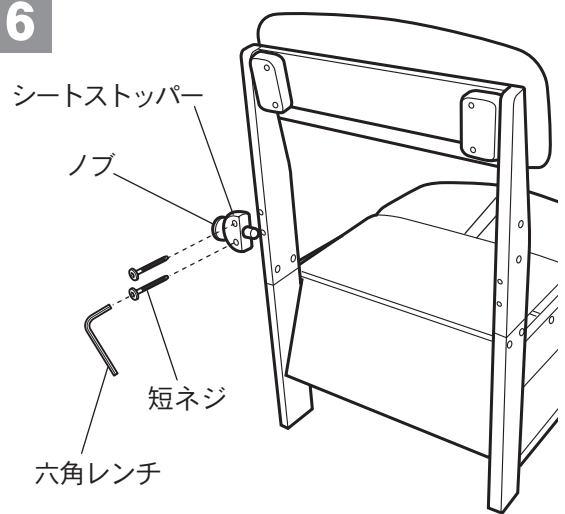

## 7 肘かけの高さを調節する

### ■取り付ける位置を決める

使用される方の症状、体格により、4段階の高さから選んでください。また長肘かけが使いにくい場合には、付属の短肘かけを取り付けてください。


### ■取り付ける

本体側面にある取り付け穴に、図のように短ネジ(40mm)でしっかり取り付けます。

### ! 注意

- ネジを取り付ける場合はまず取り付け場所全部のネジを手で数回ねじ込んで仮止めしてから、その後しっかりと締めつけるようにしてください。
- 同じ側に短肘かけと長肘かけを同時に取り付けないでください。すき間に手などをはさんでケガをすることがあります。

### 7

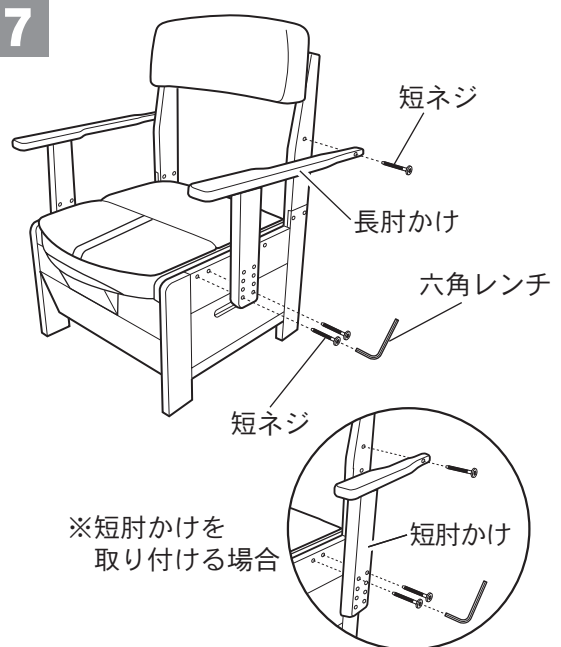



## 8 ポットを取り付ける

ポット受け板を図のような向きにして本体に取り付けます。このとき、ポット受け板はダボの下側を通すようにしてください。

次に中央の穴にポットを入れて取り付け完了です。


※オゾン消臭器を取り付ける場合は同封の「テイコブ家具調ポータブルトイレ専用オゾン消臭器取扱説明書」をご覧ください。(PT04Z、PT04WZのみ)

※暖房シートを取り付ける場合は同封の「テイコブ家具調ポータブルトイレ専用暖房シート取扱説明書」をご覧ください。(PT04W、PT04WZのみ)



## 9 ソフト便座を取り付ける


図のように「ウラ」の文字が見える方を手前にして、ソフト便座の両側の軸を本体後部の溝に入れ、手前にゆっくり倒してください。

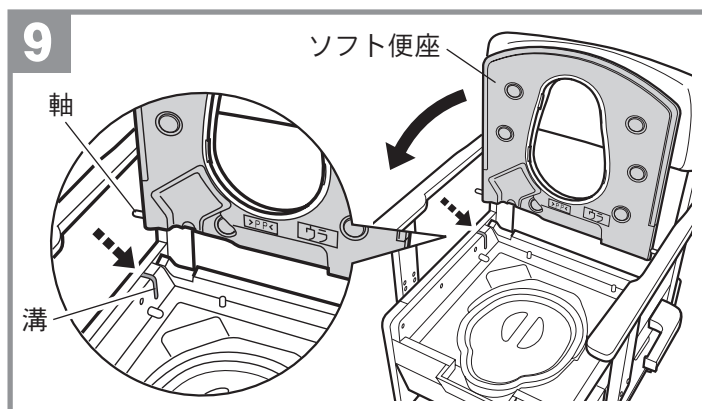

### ソフト便座のソフトシートの取りはずし方・取り付け方


#### ■取りはずし方

図のように「ウラ」の文字が見える方を手前にして、ソフトシートの突起を順に押し出します。

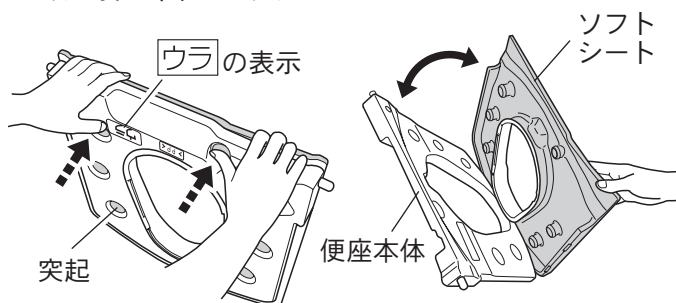

#### ■取り付け方

ソフトシートを平らな面に置き、便座本体を重ねて手で押してください。便座本体の穴からソフトシートの突起が6ヶ所出たら取り付け完了です。

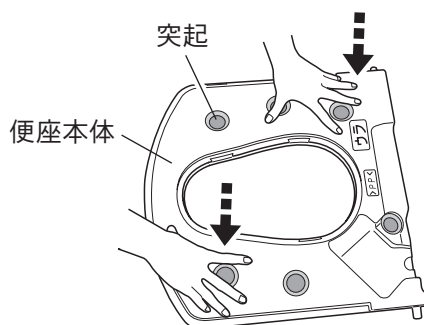


#### ⚠注意

- ソフトシートを取りはずすときは、ソフトシートの突起の中央を押してください。突起の端を押すと、指やツメを傷めることがあります。

# 10 便座カバーを取り付ける


## 取り付け方

**1**  
はずす

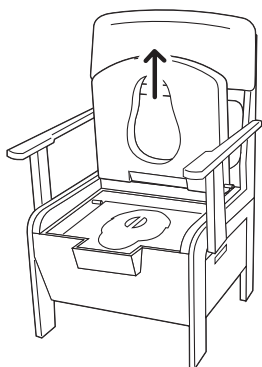


ソフト便座を本体から取り  
はずします。

**2**

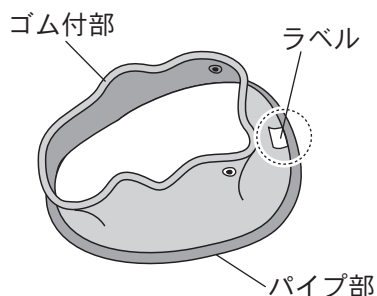


ラベルが見えるように便座  
カバーを裏返します。

**3**

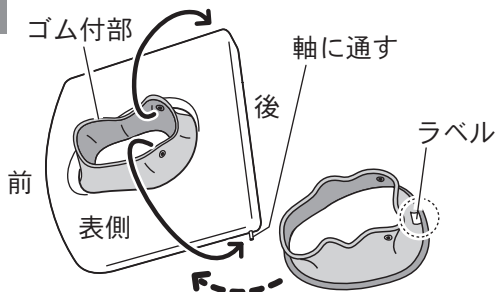


ラベルが便座後側にくるようにして  
合わせ、便座カバーのゴム付部を裏  
面より引っ張りだします。

**4**

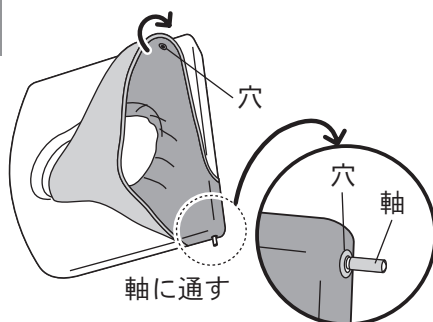


ソフト便座の軸に便座カバーの左右  
の穴を通してからかぶせます。

**5**

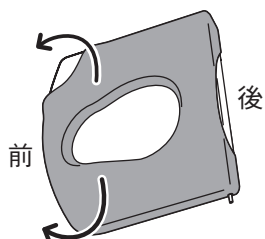

ソフト便座前側に片方  
ずつひっかけます。


**6**

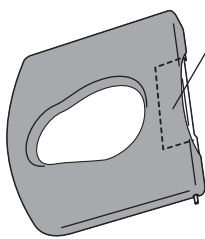

便座裏側の  
へこみ部分  
にカバーが  
かからない  
ようにして  
ください。

たるみがなくなるよう  
に、便座カバーの形を  
整えます。

**7**

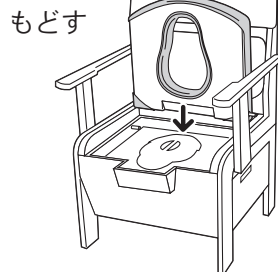

ソフト便座を本体に  
もどし取り付け完了  
です。


# 11 キャスターを取り付ける

本体を移動させやすいように後脚にキャスターを取り付けます。

※キャスターは必ず「5. 便座の高さを調節する」を行ってから取り付けてください。

## ■取り付ける位置を確認する

図のようにキャスターと床のすき間が5mm くらいの高さになるように合わせ、短ネジ2本でしっかりと固定します。

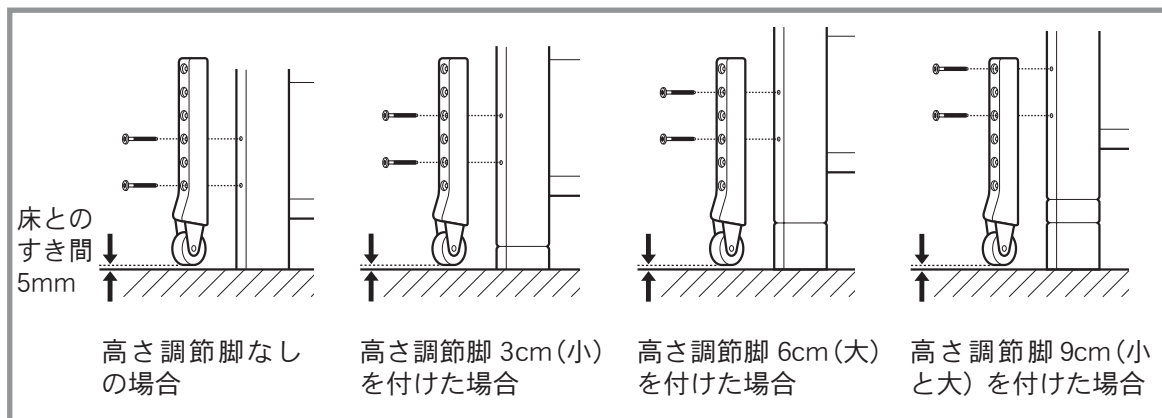


# 12 ペーパーホルダーを取り付ける

図のように空いている短肘かけのネジ穴に短ネジ(40mm)を使ってペーパーホルダーを取り付けます。

## ⚠注意

- ペーパーホルダーに手をつくなど無理な力を加えないでください。
- 取り付け部以外の場所には取り付けしないでください。

## 12

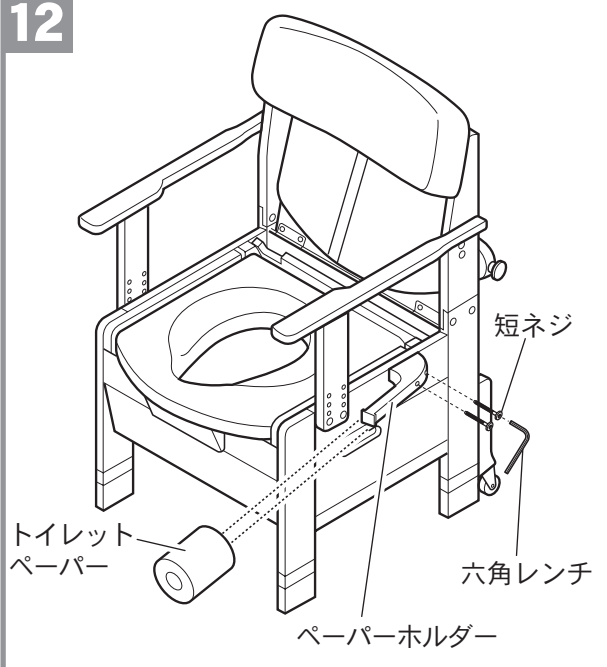




## こんな調節ができます

※調節をするときは、ケアマネージャーやご購入販売店など専門家にご相談されることをおすすめします。


### 【肘かけの高さを変えて使う】

身体の片方が不自由な方は、左右の肘かけの高さを変えて使用できます。

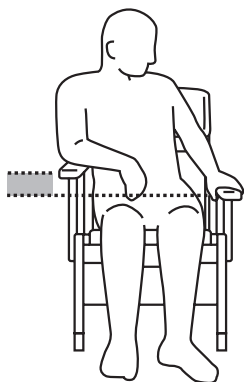


### 【肘かけの幅を変えて使う】

左右の肘かけを入れ替えることによって体格や症状にあわせて肘かけの幅を変えることができます。

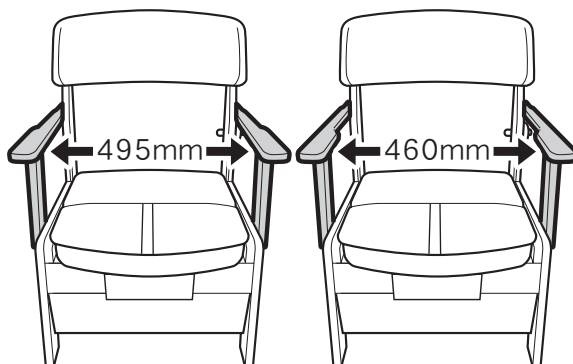


### 【背もたれの位置を調節する】

身体の小さい方は、体格にあわせて背もたれを前方へ出すことができます。背もたれの木部とクッションをつないでいるネジをはずし、奥行調節板とクッションを取りはずしてください。奥行調節板をクッションと木部の間にはさんで再度ネジで固定してください。

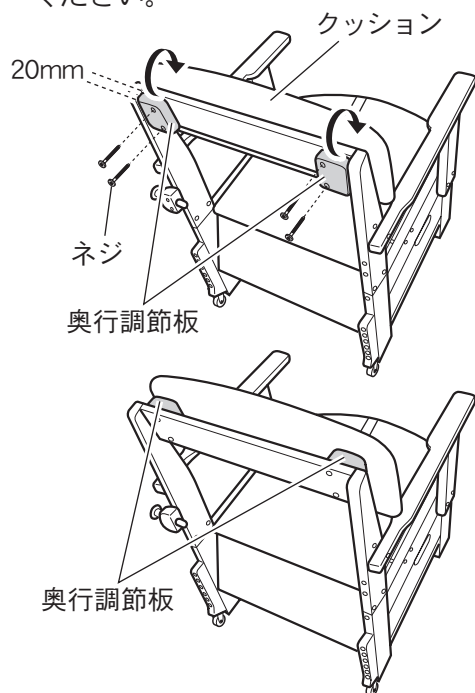

### 【身体をご自身で支えられない方は】

座面を低くして、肘かけを高く取り付けると、身体が安定した状態で座れます。

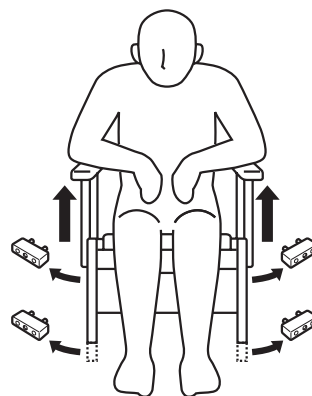


## こんな使い方ができます

※ ポータブルトイレを置く場所や向きは、使用される方の症状などを考慮してお決めください。

### 【後方からの介助】

介助なされる方が背もたれの後ろから介助する場合は、①シートストッパーを引いて解除し、②シートをたたんだまま後方に回転させて倒してください。シートをもどすときもシートストッパーを引いて解除し、シートを前方に回転させてもどしてください。

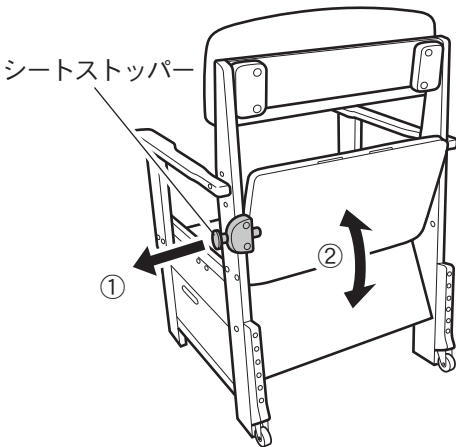


### ⚠ 注意

- シートを背もたれの後方まで回転させるときは、手で持ってゆっくりと回転させてください。途中で手をはなすと、指をはさんでケガをするおそれがあります。


### 【肘かけを取り付けずに使う】

介助なされる方が身体を支えて補助されるような場合は、肘かけを取り付けずに使用できます。

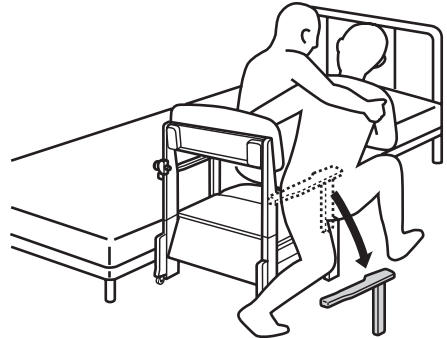


### 【短肘かけを使う】

座位横移動や体位変換の補助として、付属の短肘かけを取り付けて使用できます。

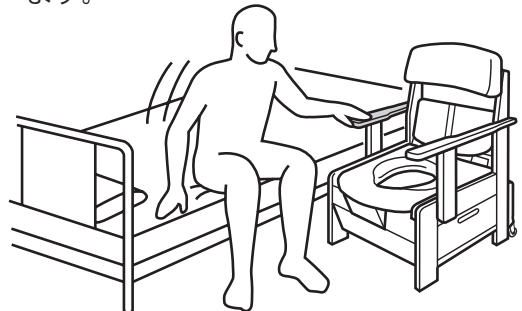

### 【片方の肘かけだけで使う】

立ち上がれないけれども、座位横移動できる方のために、肘かけを片側だけ取りはずして使用できます。

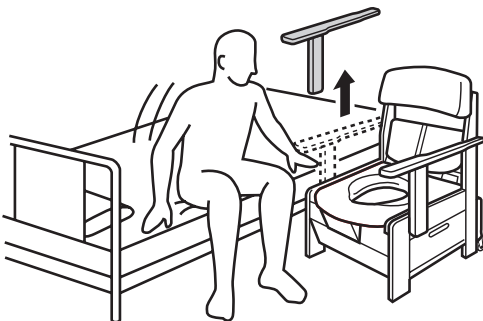

### 【キャスターを使って本体を移動させる】

両側の肘かけを持って移動させてください。背もたれやシート、便座、ポケットなど肘かけ以外の場所を持って移動させると危険ですのでおやめください。



## ご使用方法

- 使用するときは、ポットのフタをはずしてください。
- 汚物を処理するときにはポットにフタをして運び、トイレに流してください。
- 汚物の処理はできるだけ早めに行ってください。

**⚠ 注意** ● ポットを取り出すときは、便座カバーにポットのフタが引っかからないようにしてください。引っかかると内容物がこぼれることがあります。

## お手入れ方法

- 本体、便座が汚れたときは、乾いた布で拭いてください。ひどい汚れは、柔らかい布やスポンジにうすめた中性洗剤を含ませて拭きとってください。その後、水につけた布を固くしぼって洗剤を拭きとってください。
- タワシや研磨剤入りのスポンジ、磨き粉などは使用しないでください。
- トイレ用洗剤や漂白剤、ベンジン、シンナー、クレゾールなどは絶対に使用しないでください。本体、ソフト便座を傷めたり、故障や事故の原因になります。
- 便座カバーを洗濯する場合は、必ずパイプ取出口からパイプを抜いて洗濯してください。



## 修理サービスについて

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。

### 保証書について

- かならず「販売店名、お買い上げ日」などが記入してあることをお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
- 保証期間経過後、修理を依頼されるときはご購入販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

## テイコブ家具調ポータブルトイレ PT04（本体）保証書

本書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中故障が生じた場合は、本書をご提示の上、ご購入販売店にお問い合わせください。

### 保証規定

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
  - 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷
    - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
    - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害による故障および損傷
    - 一般家庭以外で、業務用（施設使用）などにご使用され故障した場合
    - 本書のご提示がない場合
    - 本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
    - 排泄物や、お手入れの際に水分がかかったことによる木部の腐敗
    - 排泄物や、お手入れの際に水分がかかったことによるにおいの染み込み
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
    - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
    - 保証期間経過後の修理については「修理サービスについて」をご覧ください。
  - 次の項目は無料修理から除外されます。
    - 便座カバー、ポット、フタ
    - 間違った使い方や、手入れ不良によるもの
    - 使用者の造作変更によるもの
    - 災害、事故によるもの
    - 実費修理に要する運賃などの諸経費
  - 日常的に使用した商品のお取替えはご遠慮ください。
- ※ 消臭器の保証に関しては「テイコブ家具調ポータブルトイレ専用オゾン消臭器」の取扱説明書をご覧ください。暖房シートの保証に関しては「テイコブ家具調ポータブルトイレ専用暖房シート」の取扱説明書をご覧ください。

商品名	テイコブ家具調ポータブルトイレ PT04（本体）	保証期間 お買い上げ日より1年間
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所 〒	
	電 話	
販売店	店名	住 所 電 話

※本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。